



## 概要

加熱して蒸気となった油をジェット部から超音速で噴射することによって真空排気する真空ポンプです。冷却水を必要としない空冷式です。


## 特徴及び使用上の注意

- 冷却水を必要としない空冷式です。
- 到達圧力に優れています。
- 大きな排気速度が得られます。
- 小型・軽量・安価です。

仕様

| 項目        | 単位    | 50Hz                       | 60Hz |
|-----------|-------|----------------------------|------|
| 実行排気速度    | L/sec | 200                        | 200  |
| 到達圧力      | Pa    | 1.0×10 <sup>-5</sup>       |      |
| モータ出力     | W     | 450                        |      |
| 使用油       |       | SX                         |      |
| 油量        | mL    | 70                         |      |
| 質量        | kg    | 5                          |      |
| 吸・排気口     | mm    | VG-65/KF-25                |      |
| 使用雰囲気温度範囲 | ℃     | 7～40                       |      |
| 最大寸法      | mm    | 145(W) × 260.5(L) × 285(H) |      |
| RoHS対応    |       |                            |      |

寸法図および対応表

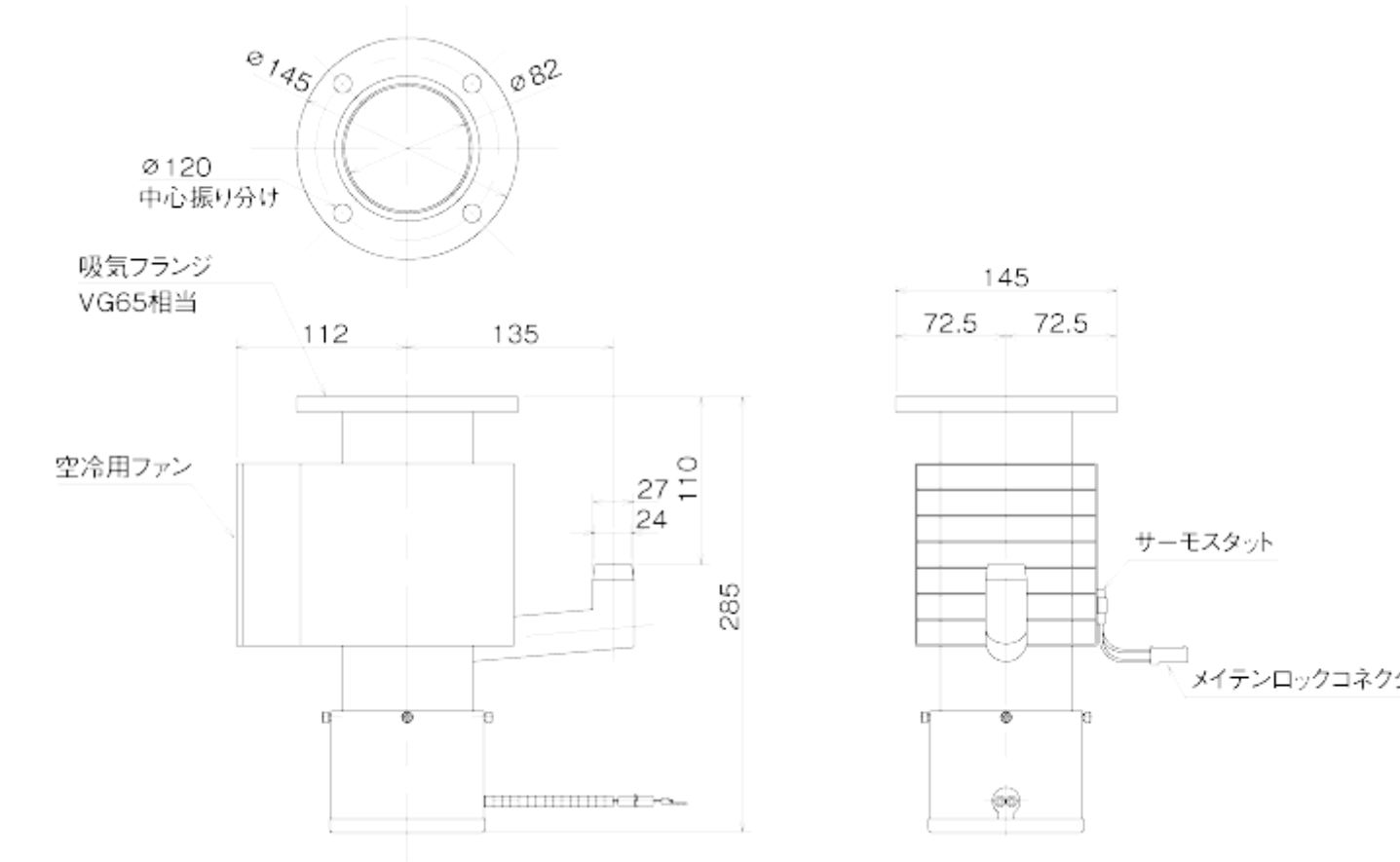

# 特記事項

- 油拡散ポンプは、単体で使用できません。必ず補助ポンプと組み合わせてください。
- 油拡散ポンプは、インラインで使用する設計となっています。吐出側のフランジを固定し、このフランジにポンプを取付けてください。
- 屋内専用のポンプです。雨や水のかかるような場所や屋外には設置しないでください。

|                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>アルバック機工株式会社</div> <div>〒881-0037<br/>宮崎県西都市大字茶臼原291-7<br/>TEL:(0983)42-1411(代)<br/>FAX:(0983)42-1422</div> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|