



概要

メカニカルブースターポンプ・油回転真空ポンプ・配管をコンパクトに一体化させた、小型の高真空排気装置です。取扱いや保守点検が容易で実験用に最適です。

特徴及び使用上の注意


- 補助ポンプの排気速度が減少する圧力領域で、排気速度の大幅アップが可能です。
- 設置スペースがコンパクトです。
- 起動ボタンひとつで、大気圧から到達圧力まで一気に排気します。

仕様

項目	単位	50Hz	60Hz
到達圧力	Pa	4.0×10 ⁻²	
質量	kg	42	
吸・排気口	mm	VG-40	
使用雰囲気温度範囲	℃	7～40	
最大寸法	mm	241.4(W) × 534.5(L) × 399(H)	
RoHS対応		●	

最大寸法(200V系):241.4mm(W)×581mm(D)×399mm(H)

寸法図および対応表

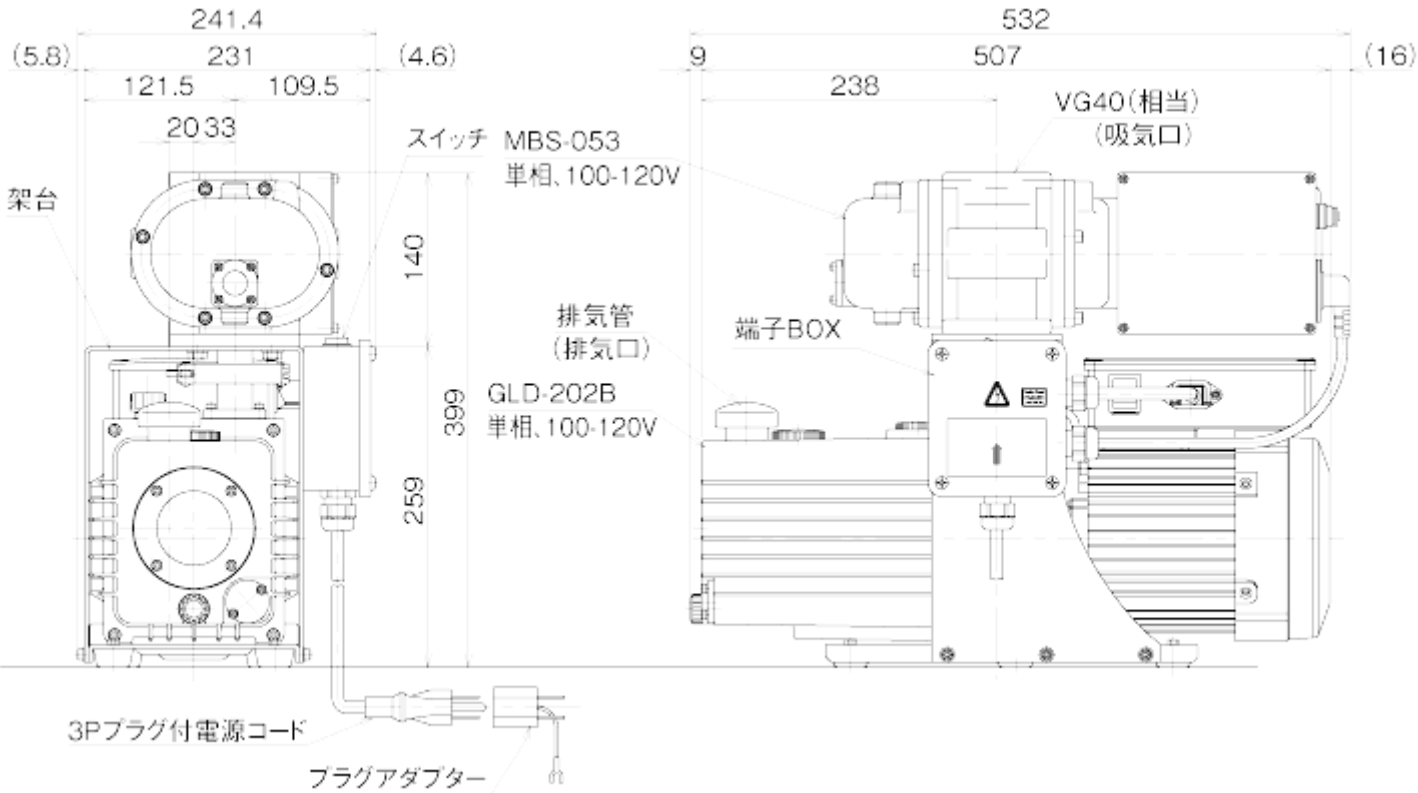

特記事項

- 電源電圧には、100-120V仕様と200-240V仕様があります。ご注文時にご指定ください。
- メインポンプ:メカニカルブースターポンプ 833 L/min (at 100Pa)
- 補助ポンプ:油回転真空ポンプ 200 L/min
- 所要電気量:単相 (100-120V / 200-240V): 1.5kVA
- 取り合い:100V系 :ビニルキャブタイヤケーブル(プラグ付) 1.8m / 200V系 : 先バラ
- アース:D種 (接地抵抗値/100MΩ以下)

対応オプションパーツ

No.	分類名	シリーズ	品名
1	インライントラップ	OMIシリーズ	OMI-200
2	オイルミストトラップ	OMTシリーズ	OMT-200A
3	真空配管用部品		クイックカップリング付きフランジ (VF40×KF40)

アルバック機工株式会社

〒881-0037
宮崎県西都市大字茶臼原291-7
TEL:(0983)42-1411(代)
FAX:(0983)42-1422