



概要

架

台内にメインポンプ・補助ポンプ・ピラニ真空計・電離真空計・バルブ配管・電気系等の必要機器をコンパクトに収納した、抵抗加熱式で小型の真空蒸着装置です。DEPOXシリーズは、排気系の構成が異なる4タイプを用意しています。取扱いが容易で基礎研究開発等の実験用に最適です。

特徴及び使用上の注意

- ガラスベルジャーにより内部が見やすく、操作性が良好です。
- メインポンプを停止させることなく、真空槽の開放を行うことが可能です。
- 蒸発電源・電極の追加により、同時蒸着・多層蒸着(最大4層)が可能です。
- キャスター付で、移動が容易な蒸着装置です。
- アジャスター付で、設置の安全性を確保できます。

仕様


項目	単位	値
到達圧力	Pa	4.0×10 ⁻⁴
	kPa	-101.3 ^{#1}
排気時間		4.0×10 ⁻³ Pa/10min
到達圧力(液体窒素使用時)	Pa	2.0×10 ⁻⁴
	kPa	-101.3
排気時間(液体窒素使用時)		3.0×10 ⁻³ Pa/10min
真空層		ガラスベルジャー(内径φ300mm×高さ300mm)
フィードスルーカラー		12ポート(側面8/底面4)
基板推奨サイズ		□50mm・□140mm(Max)
基板/電極間距離		Max 200mm
蒸発電極構成		1点式
蒸発電極		SEREM PSE-150C・1 式 0-10V 150A(Max)
メインポンプ		ターボ分子ポンプ 345L/sec
液体窒素トラップ		オプション
補助ポンプ		スクロールポンプ (250L/min)
メインバルブ		パタフライバルブ
補助バルブ		三方向バルブ
自動リークバルブ		有り
操作		手動
ピラニ真空計		ISG1(WP-01)
電離真空計		ISG1(M-34)
最大寸法	mm	730(W) × 584(L) × 1161(H)
質量	kg	160
最大寸法(電源)	mm	480(W) × 435.3(D) × 149(H)
質量(電源)	kg	40
RoHS対応		

#1: 単位が[kPa]の到達圧力はゲージ圧表示です。

ユーティリティ

項目	単位	値
所要電気量(本体)		単相 (100V)(50/60Hz): 0.9kVA
所要電気量(電源)		単相 (240V) (50/60Hz): 1.5kVA
アース端子		D種 (接地抵抗値 100Ω以下)
取り合い(本体)		単相 (100V): ビニルキャブタイヤケーブル(R3.5-4圧着端子付) 4m
取り合い(電源)		単相(200V): ビニルキャブタイヤケーブル(R2.0-5 圧着端子付) 2m

寸法図および対応表

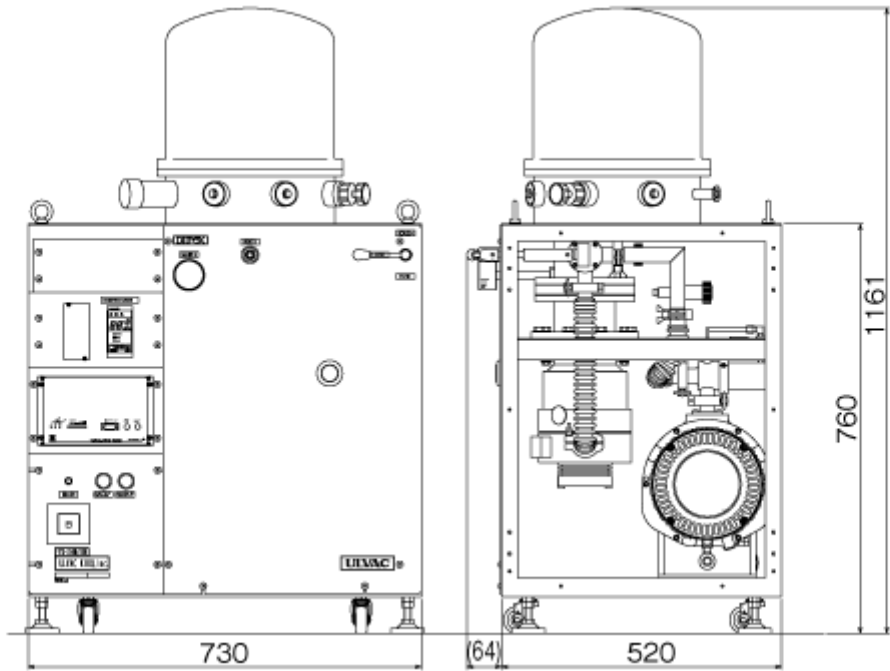

特記事項

- 最大基板サイズは膜厚分布を考慮しない時の値となります。

対応オプションパーツ

No.	分類名	シリーズ	品名
1	成膜装置オプションパーツ		追加シャッター
2	成膜装置オプションパーツ	防着板	防着板
3	成膜装置オプションパーツ		ベルジャーカバー
4	成膜装置オプションパーツ		ベルジャーホルダー
5	成膜装置オプションパーツ	制御操作盤	制御操作盤
6	成膜装置オプションパーツ		膜厚コントローラ CRTM-6000G
7	成膜装置オプションパーツ	膜厚コントローラ	膜厚コントローラ CRTM-9200
8	成膜装置オプションパーツ		膜厚センサー CRTS-4
9	成膜装置オプションパーツ	電極仕切板	電極仕切板
10	成膜装置オプションパーツ		昇降装置
11	成膜装置オプションパーツ		ガス導入ポート
12	成膜装置オプションパーツ		ゲージポートセット
13	成膜装置オプションパーツ		ハーメチックシールポートセット
14	成膜装置オプションパーツ	アダプター	KF25 Adapter
15	成膜装置オプションパーツ		液体窒素トラップ
16	成膜装置オプションパーツ		金属ベルジャー
17	成膜装置オプションパーツ	蒸発電源	蒸発電源 SEREM PSE-150C
18	成膜装置オプションパーツ	基板加熱装置	基板加熱装置 SH-350F
19	成膜装置オプションパーツ	基板加熱装置	基板加熱装置 SH-650F
20	成膜装置オプションパーツ		試料ホルダー（ホルダーA）
21	成膜装置オプションパーツ		試料ホルダー（ホルダーB）

No.	コード	分類名	シリーズ	品名
22	成膜装置オプションパーツ	試料ホルダー	試料ホルダー(ホルダーC)	
23	成膜装置オプションパーツ	試料ホルダー	試料ホルダー(ホルダー ソフトA)	
24	成膜装置オプションパーツ	試料ホルダー	試料ホルダー(ホルダー ソフトB)	
25	成膜装置オプションパーツ	封止フランジセット	封止フランジセット	
26	成膜装置オプションパーツ		基板回転機構	
27	成膜装置オプションパーツ		UFC070アダプター	

アルバック機工株式会社

〒881-0037
宮崎県西都市大字茶臼原291-7
TEL:(0983)42-1411(代)
FAX:(0983)42-1422